

Chariots ouverts de transport en aluminium



Chariots ouverts de transport en aluminium

Applications

- ✓ Nos chariots de transport en aluminium ont été conçus pour permettre le transport durable et léger de produits médicaux dans les hôpitaux.
- ✓ Avec vous, nous cherchons volontiers à résoudre vos autres défis d'ordre logistique à l'aide de ce type de chariots.

Confort

- ✓ Grâce aux roulettes additionnelles ajoutées dans les guides, il est plus facile de déployer et de rétracter les modules lourdement chargés, voir page 4.
- ✓ Les poignées de poussée sur les chariots hauts sont posées à la verticale pour permettre à tous de trouver la hauteur de poussée ou de traction idéale.
- ✓ Les quatre roulettes sont placées aux coins extérieurs du châssis. Cela garantit la stabilité et la manœuvrabilité des chariots légers.
- ✓ Les chariots sont livrés à votre établissement de soins avec guides modulaires et quatre poignées de poussée installées.




Hygiénique

- ✓ Les chariots peuvent être nettoyés et désinfectés à la main avec des détergents neutres.
- ✓ Convient au transport depuis et vers le complexe Salle d'opération/STE.
- ✓ Matériau inoxydable, puisque le châssis et les guides contiennent de l'aluminium.

Qualité

- ✓ Le châssis léger est en aluminium anodisé de haute qualité.
- ✓ Les guides modulaires sont faits de nylon et d'aluminium.
- ✓ Les chariots repris dans ce dépliant sont équipés de modules ABS.
- ✓ Cette combinaison garantit une solution durable pendant des années.
- ✓ Le chariot de transport ouvert est disponible dans deux configurations.
- ✓ Les roulettes utilisées sont spécialement conçues pour être utilisées dans les soins de santé.

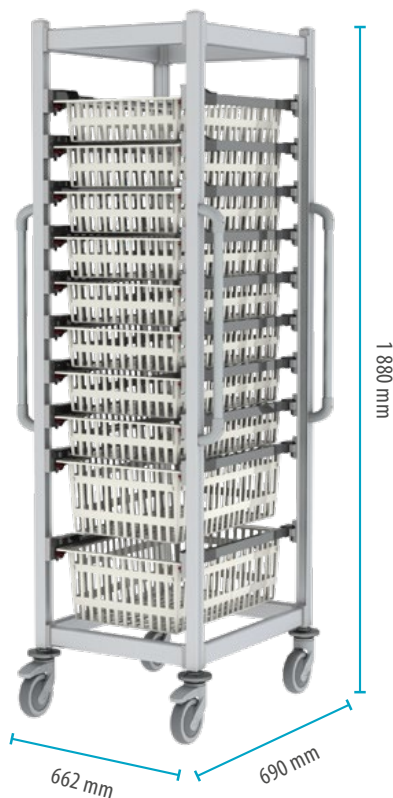

N° d'art. 203440200ALU
 Chariot ouvert de transport intégral (1/1)
 modulaire en aluminium, pour douze
 modules de 400 x 600 mm

662 x 690 x 1 880 mm (L x P x H)

Chariot ouvert de transport modulaire pour **12 modules**. Le chariot de poids faible est doté de poignées de poussée en aluminium. Les roues sont munies de butées en caoutchouc.

Il est facile de modifier la position des guides. Ce chariot est composé de guides de 600 mm.

Les douze positions des guides modulables et poignées de poussée sont incluses dans le chariot.

Le chariot peut aussi être livré avec 2 poignées de poussée ou sans poignées de poussée sur un seul côté. Dans ce cas, le chariot perd 46 mm de largeur par côté (respectivement 616 mm / 570 mm).

Les modules doivent être commandés séparément.

Tout savoir

Chariots de transport

Modulable

Selon l'ISO3394, ces chariots ont une largeur de 400 mm et une profondeur de 600 mm.


Châssis en aluminium

L'armature du chariot est composée d'éléments de châssis en aluminium. Ils sont faciles à assembler.

En principe, nous assemblons ces chariots pour vous. Et nous les munissons de poignées de poussée, de guides modulaires et des modules requis.

Nettoyage

Les chariots peuvent être nettoyés à la main avec des détergents neutres.

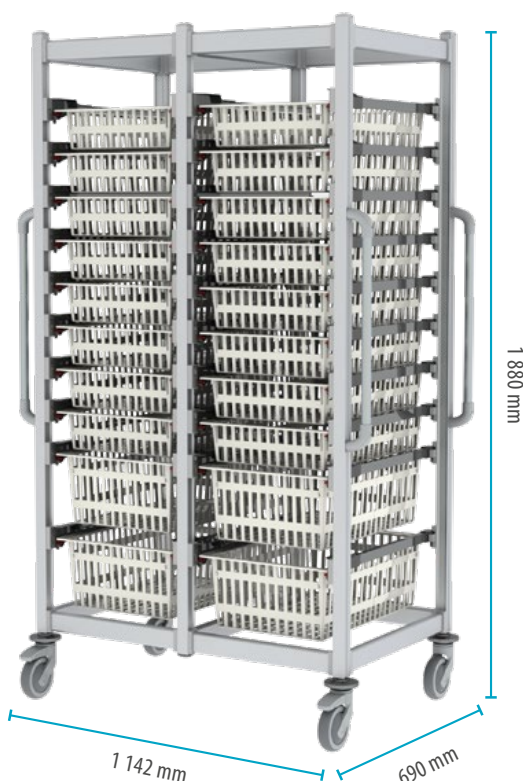

N° d'art. 203840200ALU
 Chariot ouvert de transport intégral (2/1)
 modulaire en aluminium, pour vingt-
 quatre modules de 400 x 600 mm

1 142 x 690 x 1 880 mm (L x P x H)

Chariot ouvert de transport modulaire pour **24 modules**. Le chariot de poids faible est doté de poignées de poussée en aluminium. Les roues sont munies de butées en caoutchouc.

Il est facile de modifier la position des guides. Ce chariot est composé de guides de 600 mm.

Les vingt-quatre positions de guides modulables et poignées de poussée sont livrées avec le chariot.

Le chariot peut aussi être livré avec 2 poignées de poussée ou sans poignées de poussée sur un seul côté. Dans ce cas, le chariot perd 46 mm de largeur par côté (respectivement 1 096 mm / 1 050 mm).

Les modules doivent être commandés séparément.

Vous voulez en savoir plus sur nos solutions STE pour votre hôpital ?



Solutions chaîne STE

allmodul.fr/téléchargements



N° d'art. 41000901

Roulette pour les guides

Roulette en PP (polypropylène) et support en POM (polyoxyméthylène)

Pour une utilisation dans les guides en synthétique, pour rentrer et sortir les modules et les clayettes sans friction, spécialement conçue pour les modules plus lourdement chargés.

2 roues sont nécessaires par module.



N° d'art. 21000200ALU

Autocollants recouvrants pour les chariots ouverts de transport en aluminium

Autocollants auto-adhésifs par lot de 4.

Des guides peuvent être retirés du chariot afin de réaliser des compartiments entièrement selon vos souhaits. À ce moment-là, les trous de suspension deviennent visibles. Vous pouvez recouvrir ces ouvertures avec ces autocollants en aluminium. Les autocollants protègent contre l'humidité et la saleté des ouvertures.

Coordonnées All Modul

BE

All Modul SPRL
Albert Dehemplaan 31
8900 Ypres
T : + 32 57 280 116
www.allmodul.be
info@allmodul.be

FR

All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T : + 33 328 501 840
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

NL

All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T : + 31 (0)30 20 40 260
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl


Vous voulez en savoir plus sur nos solutions de modules pour votre établissement ?



Modules

Pour un relevé actuel de tous nos modules, consultez le site web et téléchargez les brochures

allmodul.fr/téléchargements

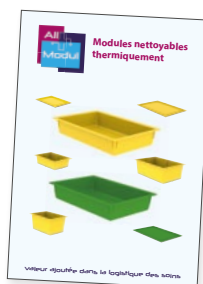

Modules nettoyables thermiquement